

# FT 2

Одinarный или двойной барабан  
Программируемая скорость вращения / подключение  
аналитических весов  
Расчёт процента истираемости и распечатка отчётов теста

sotax



## Испытание на ломкость и истирание

# FT 2 -Тестирование на одном или двух барабанах



sotax.com/FT2

Расчет процента ломкости /  
потери веса и распечатка  
протоколов испытаний

Выполните два теста на ломкость /  
истирание одновременно

Программируемая скорость  
вращения / время

Процедура квалификации по меню  
с печатным отчетом

Встроенный механизм наклона 10°  
в соответствии с USP

Сборный лоток для каждого  
барабана



Удобная навигация  
SingleButton™

Сеть и управление  
данными с q-doc®

1-2 барабана

Подключение  
аналитических весов

Распечатка протоколов


Защита паролем

Электронное  
управление данными

Запись показаний веса с внешних  
аналитических весов



# Соответствие нормативным требованиям.

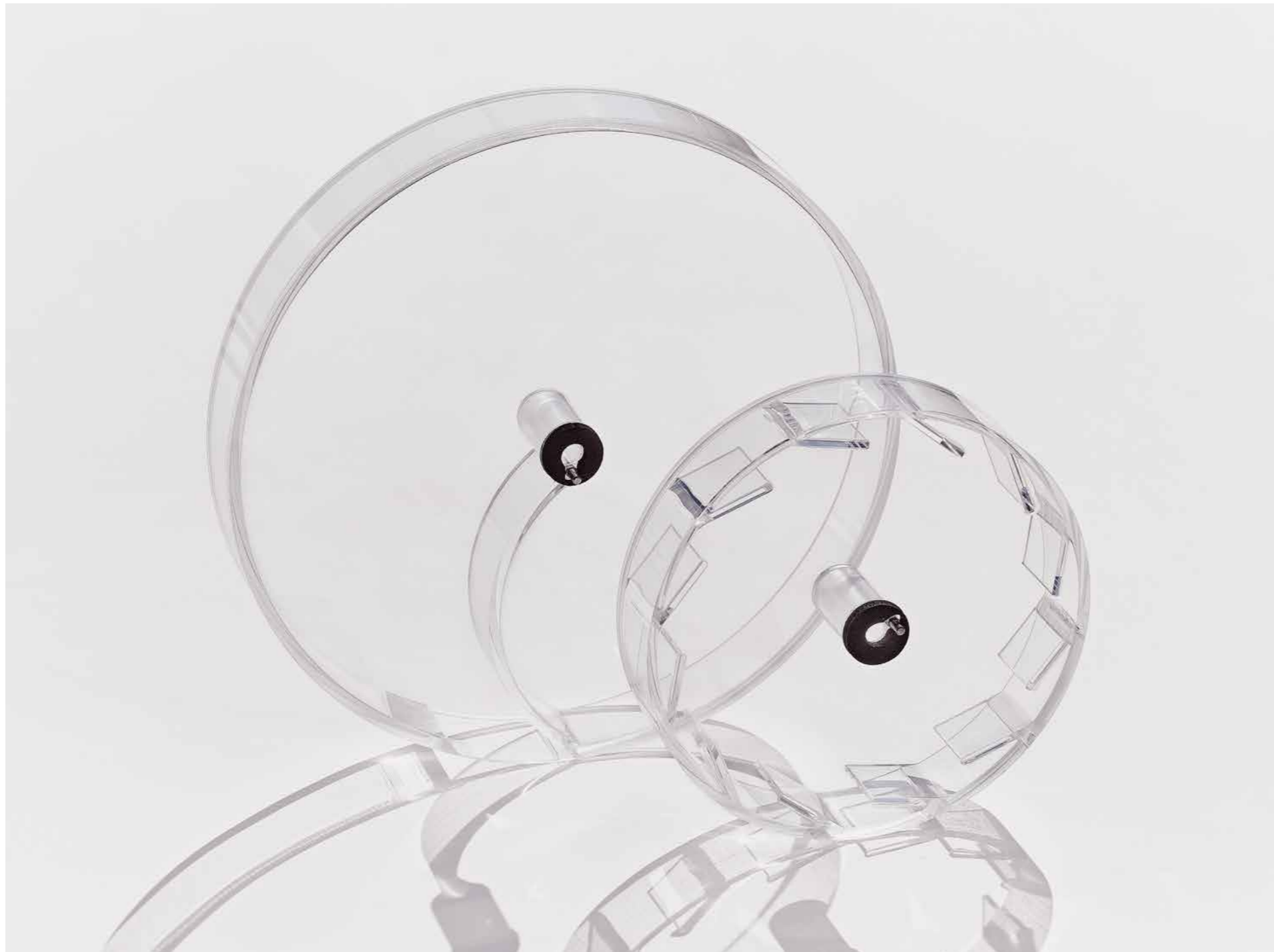

## Предотвратить ошибки.

Ручные задачи, обычно связанные с записью измерений веса или созданием отчетов, можно практически исключить, подключив стандартные лабораторные весы. При желании операторы могут начать тесты, используя предустановленные USP / Ph. Eur. метод - для обеспечения того, чтобы испытания проводились в соответствии спецификации.


## Прочный дизайн.

FT2 оснащен приводом, который гарантирует плавный запуск и остановку движения. Система быстрой блокировки предотвращает скольжение. Независимо от того, работаете ли вы в одиночной или двойной конфигурации, не нужно снимать барабаны для вставки таблеток. По завершении пробного запуска образцы автоматически выгружаются в отдельные лотки для сбора.

# Протокол теста.

Протоколы испытаний, включая потерю веса и процентную ломкость удобно распечатывать прямо с тестера. Кроме того, процедура квалификации полностью ориентирована на меню, включая печатный отчет. При необходимости FT2 также может быть интегрирован с системой управления данными q-doc® для консолидированной пакетной отчетности о различных тестах, выполненных на разных приборах.

q-doc® network with FT2

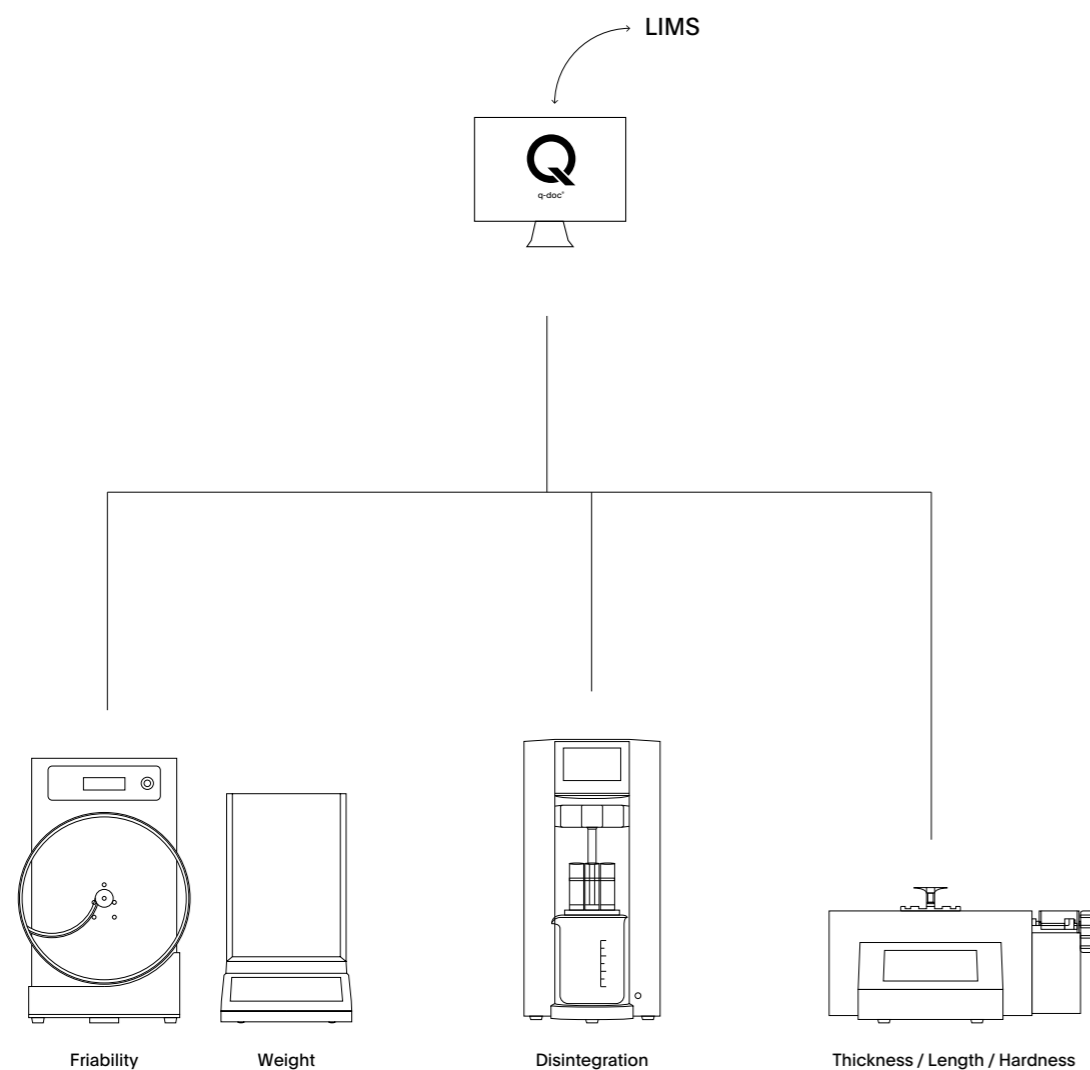

## FT 2 Технические характеристики

Количество барабанов		1 – 2
Тип барабана	Friability drum, anti-static	○
	Abrasion drum, anti-static	○
Методы	USP <1216>	●
	Ph. Eur. 2.9.7	●
	User-defined	●
Вращение	Скорость	20 – 100 rpm, programmable
	Точность	±1 rpm
Режимы	Время	●
	Счётчик оборотов	●
10° функция наклона		●
Подключение весов	Mettler Toledo® / Acculab®	●
Пользовательский интерфейс	Защита паролем	●
Принтер	LAN printer / Epson® 40col.	Ethernet / RS-232 parallel
Хранение данных	q-doc® software, for data collection	○
Интерфейс		Ethernet, 2 × RS-232 serial
Источник питания		100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Вес	(Без упаковки)	8 kg (17.7 lbs)
Габариты	Ширина	305 mm (12 inch)
	Глубина	280 mm (11 inch)
	Высота	475 mm (18.7 inch)
CE Соответствие	The FT2 fully complies with all CE and EMC equipment guidelines relative to mechanical and electrical safety and electromagnetic compatibility.	

● Включено  
○ Опция

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Продукты, показанные в этой брошюре, могут включать опции или модификации, не входящие в стандартную комплектацию.

# SOTAX Worldwide.

## Europe

### Switzerland (HQ Europe)

Aesch / Basel

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +41 61 487 5454

info@sotax.com

### Czech Republic

Prague

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +420 246 039 260

sotaxcz@sotax.com

### France

Saint-Louis

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +33 3 8970 0846

info@sotax.com

### Germany

Lörrach

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +49 7621 16 5635

info@sotax.com

### Great Britain

Foston / Derbyshire

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +44 20 8349 6947

sotaxgb@sotax.com

### Italy

Milan

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +39 02 8363 2641

sotaxitalia@sotax.com

### Ireland

Longford

P Office +353 43 334 7779

contact@labserv.ie

## Americas

### USA (HQ Americas)

Westborough, MA

P Tech Support +1 508 544 4040

P Office +1 508 417 1112

sotaxusa@sotax.com

### Canada

Westborough, MA

P Tech Support +1 508 544 4040

P Office +1 508 417 1112

sotaxcanada@sotax.com

## Asia-Pacific

### Thailand (HQ Asia-Pacific)

Bangkok

P Tech Support +91 99 202 11 211

P Office +66 26 42 68 62

sotaxasia@sotax.com

### China

Shanghai

P Tech Support +41 61 487 5460

P Office +8621-6135 6268, ext. 205

sotaxchina@sotax.com

### India

Mumbai

P Tech Support +91 99 202 11 211

P Office +91 22 4295 0191

sotaxindia@sotax.com